


KIM-ACCOUNT EINRICHTEN

Mit der Programmversion 2.0.12.6 ist KIM jetzt in psychodat verfügbar.

- 1) Zur Einrichtung Ihres KIM-Accounts wählen Sie oben im Programmmenü **Telematik** → **KIM-Account anlegen** aus.
- 2) Führen Sie die Installation des Clientmoduls über den Button **Clientmodul Installieren** (1) durch.

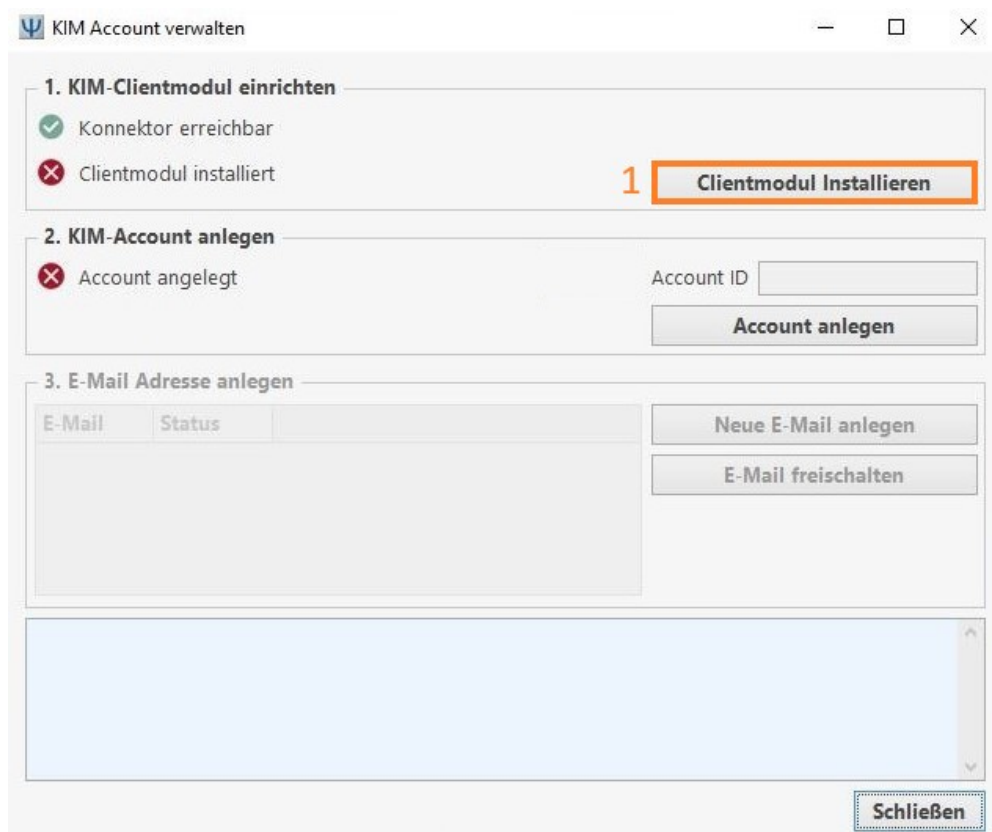

The screenshot shows a window titled "KIM Account verwalten" with three main sections:


- 1. KIM-Clientmodul einrichten**:
 - ✓ Konnektor erreichbar
 - ✗ Clientmodul installiert
 - Button: **1 Clientmodul Installieren** (highlighted with an orange box)
- 2. KIM-Account anlegen**:
 - ✗ Account angelegt
 - Account ID:
 - Button: **Account anlegen**
- 3. E-Mail Adresse anlegen**:

E-Mail	Status

 - Buttons: **Neue E-Mail anlegen**, **E-Mail freischalten**

At the bottom right, there is a **Schließen** button.

- 3) Sobald das KIM Clientmodul erfolgreich eingerichtet wurde und betriebsbereit ist, erscheint ein grüner Haken bei **Clientmodul installiert** (2). Klicken Sie auf **Account anlegen** (3).

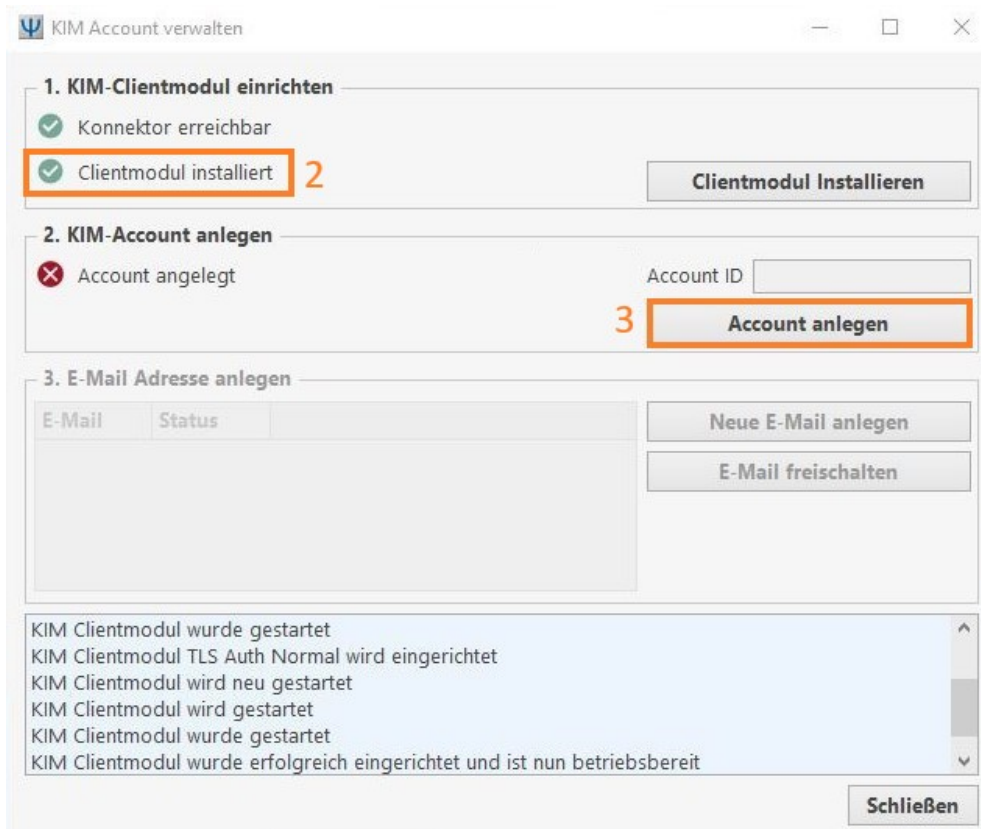

The screenshot shows a window titled "KIM Account verwalten" with three main sections:


- 1. KIM-Clientmodul einrichten**: Contains two status items. The first is "Konnektor erreichbar" with a green checkmark. The second is "Clientmodul installiert" with a green checkmark and a red "2" next to it, indicating the step to click.
- 2. KIM-Account anlegen**: Contains a status item "Account angelegt" with a red 'X' icon. To its right is an "Account ID" input field and a button "Account anlegen" with a red "3" next to it, indicating the step to click.
- 3. E-Mail Adresse anlegen**: Contains a table with columns "E-Mail" and "Status", and two buttons: "Neue E-Mail anlegen" and "E-Mail freischalten".

At the bottom, there is a log area with the following messages:

- KIM Clientmodul wurde gestartet
- KIM Clientmodul TLS Auth Normal wird eingerichtet
- KIM Clientmodul wird neu gestartet
- KIM Clientmodul wird gestartet
- KIM Clientmodul wurde gestartet
- KIM Clientmodul wurde erfolgreich eingerichtet und ist nun betriebsbereit

A "Schließen" button is located at the bottom right of the window.

- 4) Der Account wurde erfolgreich angelegt, sobald der grüne Haken bei **Account angelegt** (4) erscheint. Sie können nun eine neue E-Mailadresse anlegen. Klicken Sie auf den Button **Neue E-Mail anlegen** (5).

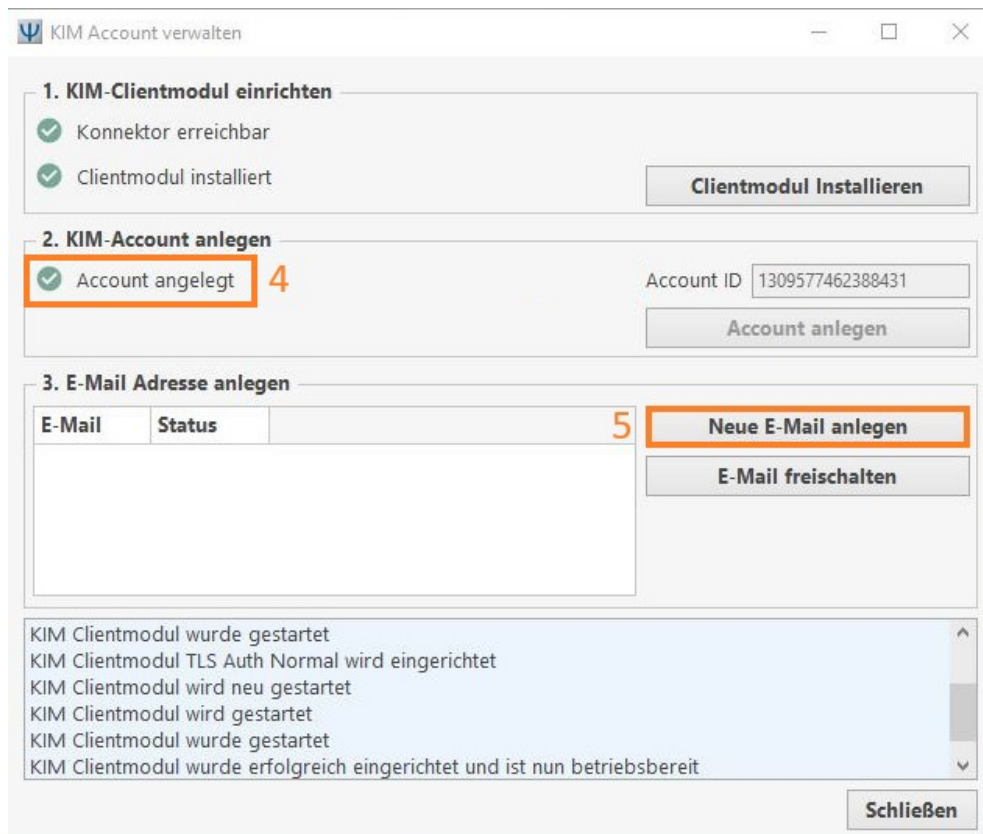

The screenshot shows a window titled "KIM Account verwalten" with three main sections:


- 1. KIM-Clientmodul einrichten**: Contains two green checkmarks for "Konnektor erreichbar" and "Clientmodul installiert", and a "Clientmodul Installieren" button.
- 2. KIM-Account anlegen**: Contains a green checkmark for "Account angelegt" (highlighted with an orange box and a '4'), an "Account ID" field with the value "1309577462388431", and an "Account anlegen" button.
- 3. E-Mail Adresse anlegen**: Contains a table with columns "E-Mail" and "Status" (with a '5' next to the header), and two buttons: "Neue E-Mail anlegen" (highlighted with an orange box) and "E-Mail freischalten".

At the bottom, there is a log area with the following messages:

- KIM Clientmodul wurde gestartet
- KIM Clientmodul TLS Auth Normal wird eingerichtet
- KIM Clientmodul wird neu gestartet
- KIM Clientmodul wird gestartet
- KIM Clientmodul wurde gestartet
- KIM Clientmodul wurde erfolgreich eingerichtet und ist nun betriebsbereit

A "Schließen" button is located at the bottom right of the window.

- 5) Tragen Sie bei **KIM-Mail (6)** Ihre Wunschadresse ein und wählen Sie eine der drei verfügbaren Endungen aus (7). Geben Sie als **Wiederherstellungs-Mail (8)** eine E-Mailadresse an, auf die Sie dauerhaft Zugriff haben.

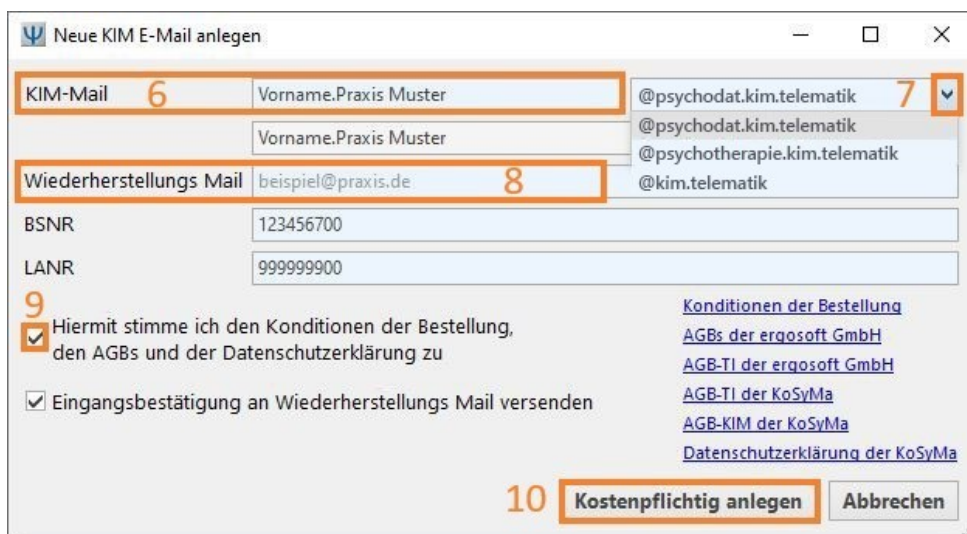

The screenshot shows a web form titled "Neue KIM E-Mail anlegen". The form contains the following fields and elements:

- KIM-Mail (6):** A text input field containing "Vorname.Praxis Muster".
- Wiederherstellungs Mail (8):** A text input field containing "beispiel@praxis.de".
- BSNR:** A text input field containing "123456700".
- LANR:** A text input field containing "999999900".
- Domain Selection (7):** A dropdown menu with three options: "@psychodat.kim.telematik", "@psychodatk.kim.telematik", and "@psychotherapie.kim.telematik".
- Agreements (9):** Two checkboxes:
 - Hiermit stimme ich den Konditionen der Bestellung, den AGBs und der Datenschutzerklärung zu
 - Eingangsbestätigung an Wiederherstellungs Mail versenden
- Links:** A list of links on the right side:
 - [Konditionen der Bestellung](#)
 - [AGBs der ergosoft GmbH](#)
 - [AGB-TI der ergosoft GmbH](#)
 - [AGB-TI der KoSyMa](#)
 - [AGB-KIM der KoSyMa](#)
 - [Datenschutzerklärung der KoSyMa](#)
- Buttons (10):** Two buttons at the bottom right: "Kostenpflichtig anlegen" and "Abbrechen".

- 6) Stimmen Sie den Konditionen, AGBs und der Datenschutzerklärung zu (9) und bestätigen Sie Ihre Bestellung über den Button **Kostenpflichtig anlegen (10)**. Ihre KIM E-Mailadresse wurde erfolgreich registriert. Mit der Registrierung erhalten Sie mehrere E-Mails an die von Ihnen angegebene Wiederherstellungsadresse. Diese E-Mails werden für die automatische Einrichtung nicht benötigt. Sie sollten diese E-Mails jedoch gut aufbewahren, gegebenenfalls extern speichern oder archivieren.

- 7) Unter **E-Mail Adresse anlegen** (11) erscheint nun Ihre neue E-Mailadresse. Aktivieren Sie diese über den Button **E-Mail freischalten** (12).

KIM Account verwalten

1. KIM-Clientmodul einrichten

- ✓ Konnektor erreichbar
- ✓ Clientmodul installiert

Clientmodul Installieren

2. KIM-Account anlegen

- ✓ Account angelegt

Account ID: 1309577462388431

Account anlegen

3. E-Mail Adresse anlegen

E-Mail	Status
ergosoft.Test@psychodat.kim.telematik	Neu

11 12

Neue E-Mail anlegen

E-Mail freischalten

KIM Clientmodul wird neu gestartet
 KIM Clientmodul wird gestartet
 KIM Clientmodul wurde gestartet
 KIM Clientmodul wurde erfolgreich eingerichtet und ist nun betriebsbereit
 E-Mail Registrierung erfolgreich (Token: MTYxZTc2MzUyYTYyZi00NmNjLTg1ODQtMGlyODRhZTliNTVl
 ZertID: 2507)

Schließen

- 8) Klicken Sie im nachfolgenden Fenster auf den Button **E-Mail mit SMC-B freischalten** (13).

Kim E-Mail einrichten

E-Mail

1. E-Mail Account mit der SMC-B aktivieren

Freischaltung möglich 13 **E-Mail mit SMC-B freischalten**

Passwort

2. E-Mail Zertifikat im Clientmodul hinterlegen

Zertifikat abrufbar

3. Postfach in PsychoDat einrichten


Freigabe Administrator Behandler 2

- 9) Es öffnet sich ein neues Fenster. Starten Sie in diesem Fenster die Authentisierung über den Button **SMC-B (14)**.

 Auth Client - 1.2.5.0-AR



10) Wählen Sie Ihre SMC-B-Karte aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Karte verwenden** (15).

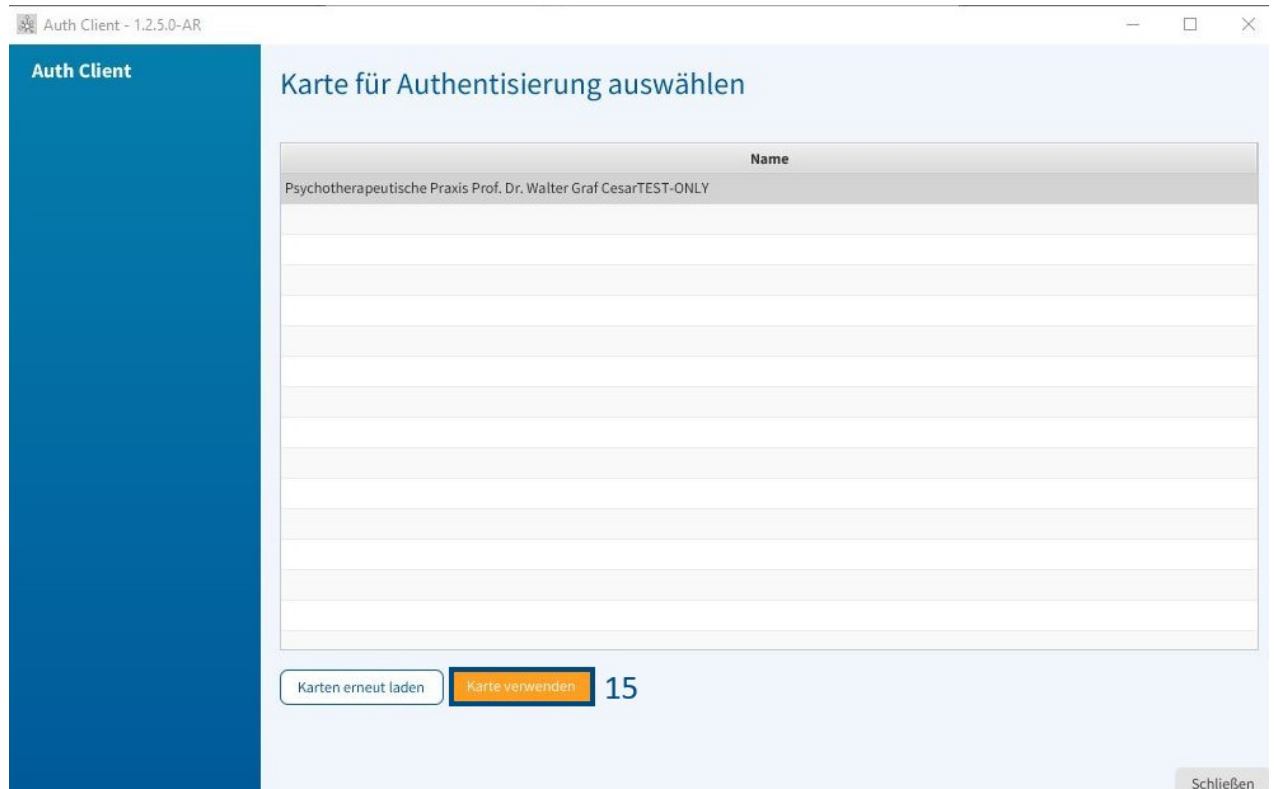The screenshot shows a software window titled "Auth Client - 1.2.5.0-AR". The main content area is titled "Karte für Authentisierung auswählen". It contains a table with a header "Name" and one row with the text "Psychotherapeutische Praxis Prof. Dr. Walter Graf CesarTEST-ONLY". Below the table are two buttons: "Karten erneut laden" and "Karte verwenden". The number "15" is displayed to the right of the "Karte verwenden" button. A "Schließen" button is located in the bottom right corner of the window.

Name
Psychotherapeutische Praxis Prof. Dr. Walter Graf CesarTEST-ONLY


Karten erneut laden **Karte verwenden** 15

Schließen

11) Klicken Sie im nachfolgenden Fenster auf den Button **Authentisieren** (16).



- 12) Nach erfolgreicher Authentisierung öffnet sich automatisch die kim+ Seite. Vergeben Sie ein Passwort und wiederholen Sie dies zur Bestätigung (17). Bitte notieren Sie sich das gewählte Passwort. Wählen Sie anschließend **Passwort bestätigen** (18) aus.

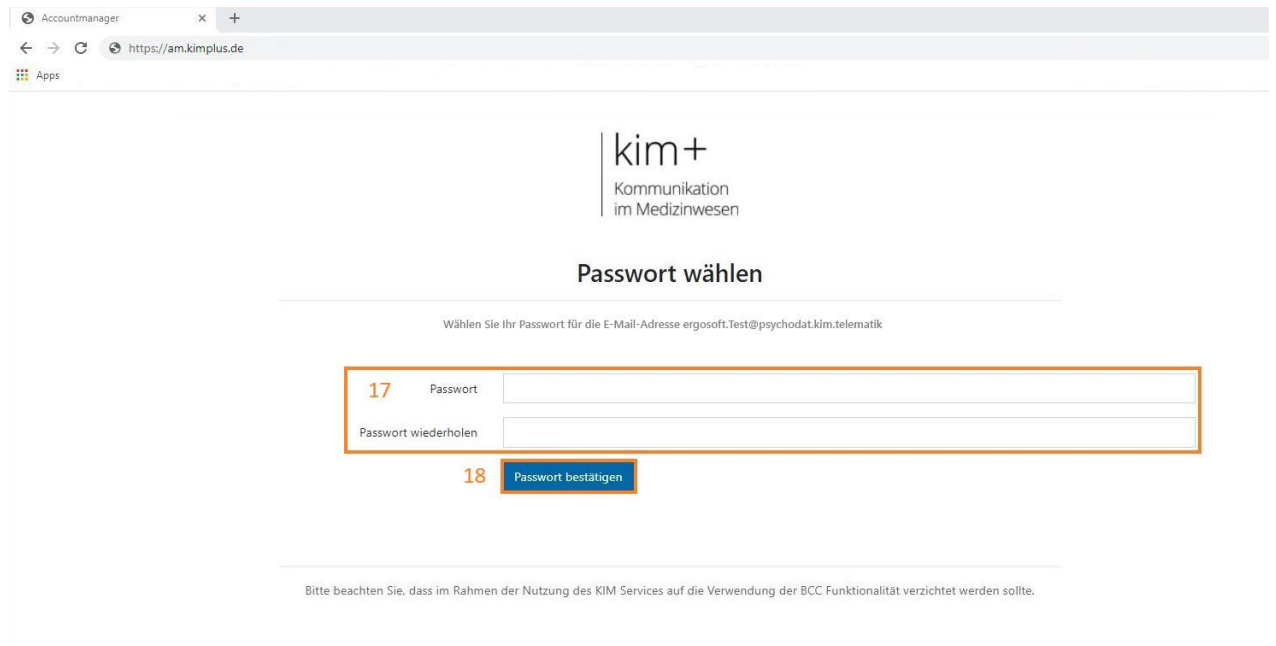A screenshot of a web browser showing the "Accountmanager" page for "kim+ Kommunikation im Medizinwesen". The page title is "Passwort wählen". Below the title, there is a instruction: "Wählen Sie Ihr Passwort für die E-Mail-Adresse ergosoft.Test@psychodat.kim.telematik". The form contains two input fields: "17 Passwort" and "Passwort wiederholen". Below these fields is a button labeled "18 Passwort bestätigen". At the bottom of the page, there is a small disclaimer: "Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der Nutzung des KIM Services auf die Verwendung der BCC Funktionalität verzichtet werden sollte."/>

Accountmanager x +

← → ↻ https://am.kimplus.de

Apps

kim+
Kommunikation
im Medizinwesen

Passwort wählen

Wählen Sie Ihr Passwort für die E-Mail-Adresse ergosoft.Test@psychodat.kim.telematik


17 Passwort

Passwort wiederholen

18 **Passwort bestätigen**

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der Nutzung des KIM Services auf die Verwendung der BCC Funktionalität verzichtet werden sollte.

- 13) Geben Sie Ihr gewähltes Passwort in psychodat unter **Passwort** (19) ein und klicken Sie den Button **Zertifikat importieren** (20).

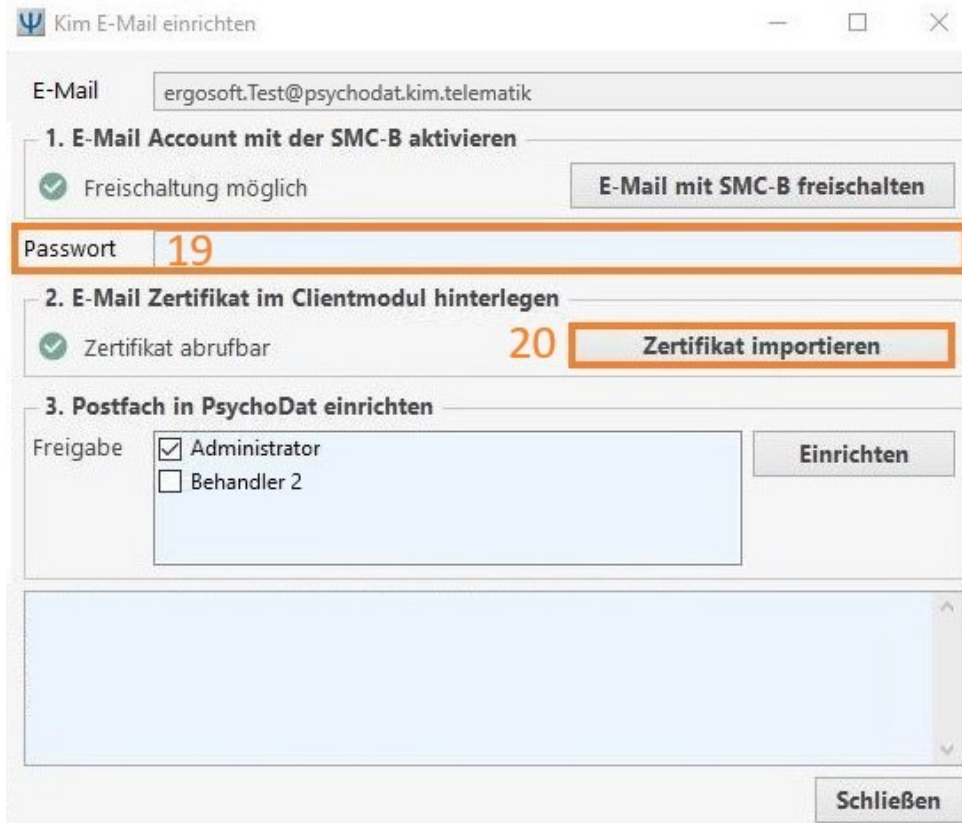

Kim E-Mail einrichten

E-Mail: ergosoft.Test@psychodat.kim.telematik

1. E-Mail Account mit der SMC-B aktivieren

Freischaltung möglich E-Mail mit SMC-B freischalten

Passwort: 19

2. E-Mail Zertifikat im Clientmodul hinterlegen


Zertifikat abrufbar 20 Zertifikat importieren


3. Postfach in PsychoDat einrichten

Freigabe: Administrator Behandler 2 Einrichten

Schließen

- 14) Sobald das Zertifikat importiert wurde, wählen Sie den oder die Behandler aus, die Zugriff auf das KIM-Postfach haben sollen (21). Schließen Sie den Vorgang über den Button **Einrichten** (22) ab. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, sehen Sie anhand des Status im unteren Bereich des Fensters, ob das E-Mail-Postfach freigegeben wurde. Sie können das Fenster schließen.

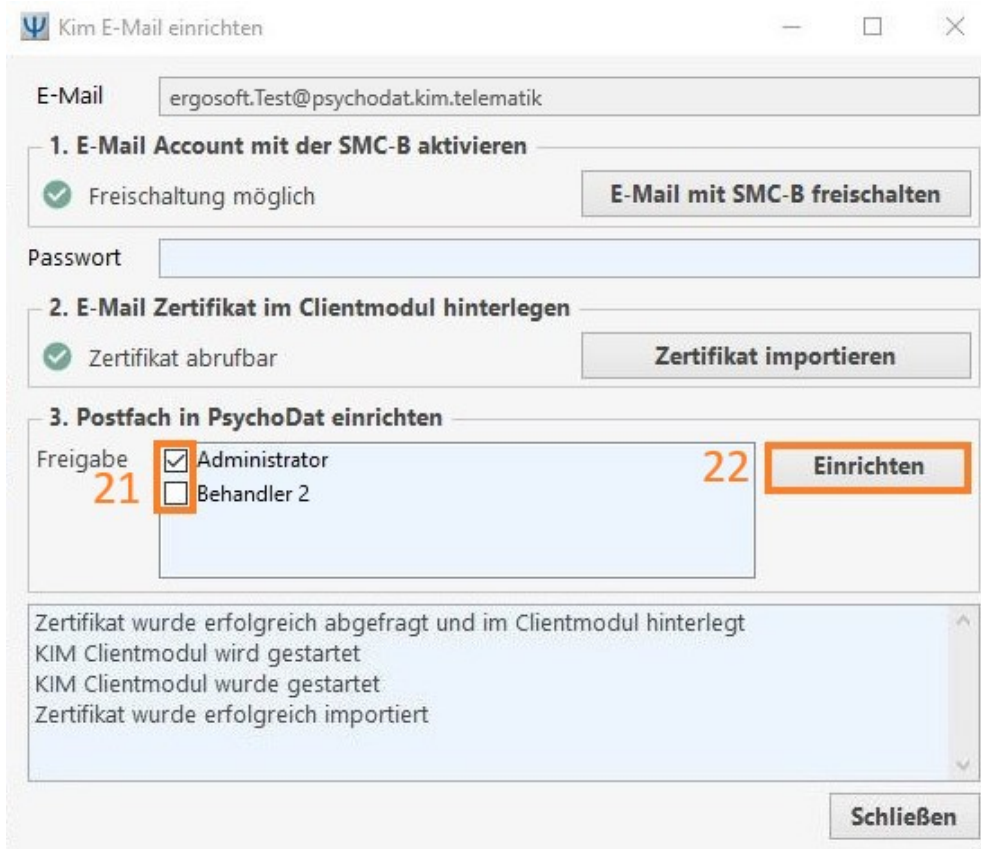

Ihr KIM-Postfach kann nach Neustart von psychodat verwendet werden. Klicken Sie auf den  Button links in der Schnellstartleiste.